



**Milian Lite légzésfigyelő készülék
Gyors üzembehelyezési és használati útmutató**



HU – Magyar

Kérjük, üzembehelyezés előtt olvassa el a Használati útmutatót!

Műszaki tanácsadás és szerviz:

+36 30 793 37 47

kapcsolat@milianbaby.hu

Tartalomjegyzék:

3. oldal:

Gyors üzembehelyezési útmutató:

Összeszerelés
Bekapcsolás
Kikapcsolás
Beállítások

4. oldal:

Használati útmutató

Típusok, a doboz tartalma
A készülék funkciója
A készülék működése

5. oldal:

Rendeltetésszerű használat
Figyelmeztetések
Korlátozások
Üzembe helyezés

6. oldal:

Üzembe helyezés utáni próba

7. oldal:

Küszöbérték megváltoztatása
Memória visszajátszása
Elemfeszültség figyelés

8. oldal:

Érzékelőlapok elhelyezési módjai

9. oldal:

Tépőzár felhelyezése
Vezetékrögítő alkalmazása

10. oldal:

Műszaki adatok, tisztítás, karbantartás
Információ az elemek biztonságos kezeléséhez

11. oldal:

Gyártói megfelelőségi nyilatkozat

12. oldal:

Visszavásárlási lap

Gyors üzembehelyezési útmutató

Összeszerelés


1. Az érzékelőlapokat helyezze el a Használati útmutatóban (8. oldal), vagy a doboz hátoldalán megtalálható képes összeállítási javaslat szerint. A külön megvásárolható, kiegészítő érzékelőlapokkal együtt akár 4 darabot is csatlakoztathat a készülékhez egy időben. A központi egység végleges helyére történő rögzítéséhez segítség a 2 db. erős, öntapadós tépőzár.

**FONTOS! A központi egységet úgy kell elhelyezni, hogy a baba ne érje el.
Használja a mellékelt spirális vezetékrögzítőt (Használati útmutató 9. oldal)!**

2. Elemek behelyezése: a készülék fedelét le kell venni a hátoldalon lévő réseket használva. Kézzel szétnyitható egymástól az alsó és felső rész, szerszámot nem kell használni hozzá.


3. A készülék fedelének visszahelyezése: figyelje, hogy a LED és a nyomógomb a furat alatt pozícióban legyen, majd óvatosan nyomja a helyére a fedelet. Csavar nem kell, az alsó és felső rész összeillesztésekor a felsőrész fehér keretét kell nyomni az összeillesztéshez.

Bekapcsolás

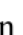Nyomja meg és tartsa nyomva a készülék elején található  jelű bekapcsoló gombot. Amikor megjelenik a kijelzőn körbefutó vonal (kb 1 másodperc után), akkor engedje fel a nyomógombot. A kijelzőn megjelenik "E" majd egy szám 1-től 5-ig, amely megmutatja az elemfeszültség szintjét (5 magas, 1 alacsony töltöttség). Ezt követően a gyárilag beállított L 3 **küszöbérték** látható rövid ideig (erről részletesen olvashat a Használati útmutató 6. oldalán), majd a kijelzőn 3 másodpercenként felvillan 0-tól 9-ig egy mozgás érzékeléssel arányos szám (0 nincs mozgás, 9 erőteljes mozgás).

Ha a kijelzett szám eléri, vagy meghaladja a küszöbértéket (3-as), akkor a kijelző mellett bal oldalon levő LED zöld villanással jelzi, hogy a mozgásérték megfelelő.

Kikapcsolás

Bekapcsolt állapotban nyomja meg a  gombot rövid ideig. Amint megjelenik a "≡", engedje el a gombot, majd ismét nyomja meg röviden. A készülék két rövid hangjelzés után kiírja: "OFF", és kikapcsol. Mindezekre azért van szükség (két gombnyomás és hangjelzés), hogy ne lehessen véletlenül kikapcsolni a készüléket, illetve a hang tájékoztasson a kikapcsolásról. A hangjelzés azonban néha zavaró, nem kívánt is lehet, ezért ha a "≡" megjelenése után másodszor hosszabban tartja nyomva a gombot (amíg a "≡" el nem tűnik a kijelzőről), akkor hang nélkül kapcsol ki a készülék.

Beállítások

A készülék felhasználói beállítás-módosítás nélkül is biztonságosan üzemel. Előfordulhat azonban olyan körülmény, amikor a gyári beállításon célszerű változtatni. Ilyen lehet például, ha erős utcai forgalom miatt a zavaró rezgések hatását kell kiküszöbölni (erről részletesen olvashat a Használati útmutató 7. oldalán).

Használati útmutató

Kedves Szülő!

Köszönjük, hogy a Milian Lite légzésfigyelő készüléket választotta!

A leggondosabb szülői felügyelet sem képes arra, amire a Milian Lite légzésfigyelő: folyamatosan figyeli a gyermek minden rezdülését és még időben jelez, ha mozgás hiányát észleli. Így a szülőnek lehetősége van beavatkozni, meg tudja akadályozni egy esetleg súlyos következményekkel járó folyamat kialakulását. A készülék jelez, ha baj van, de a szülői gondoskodást nem helyettesíti. A készülék nem életmentő berendezés – azonban **Őn és a Milian Lite légzésfigyelő együtt életet menthet!**

Típusok, a doboz tartalma

- **Milian Lite 1:** ML-01 központi egység, **1 db 30x50 cm érzékelőlap**, 1 db vezetékrögztítő spirál, 2db „AA” ceruzaelem, 2 db tépőzár, Gyors üzembehelyezési és használati útmutató, Jótállási jegy.

Megjegyzés: Elsősorban babafészek alá, bölcsőbe vagy babaöbölhöz ajánljuk a használatát.

- **Milian Lite 2:** ML-01 központi egység, **2 db 30x50 cm érzékelőlap**, 2 db vezetékrögztítő spirál, 2db „AA” ceruzaelem, 2 db tépőzár, Gyors üzembehelyezési és használati útmutató, Jótállási jegy.

Megjegyzés: 60x120 cm-es kiságyba javasoljuk a használatát.

- **Milian Lite 3:** MB-01 központi egység, **3 db 30x50 cm érzékelőlap**, „Y” elosztó, 4 db vezetékrögztítő spirál, 2db „AA” ceruzaelem, 2 db tépőzár, Gyors üzembehelyezési útmutató és Használati útmutató, Jótállási jegy.

Megjegyzés: 60x140 cm-es kiságyba javasoljuk a használatát.

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és csak az útmutatónak megfelelően használja a terméket! A készülékhez mellékelt "Gyors üzembehelyezési útmutató" elengedhetetlen rövid információkkal szolgál a készülék működését illetően, azonban a biztonságos használathoz feltétlenül szükséges az alábbiak ismerete.

A készülék funkciója

Az egészséges csecsemő mozgásának figyelése. Mozgás hiányának észlelése esetén a szülő figyelmeztetése hangjelzéssel és rövid szöveges tájékoztatással.

A készülék működése

A készülék érzékeli a csecsemő mozgását, egy vagy több érzékelőlappal. Az érzékelőlap(ok) jeleit folyamatosan elemzi, a mozgás erősségét kijelzi, szükség esetén beavatkozást kérő jelzést ad a szülőnek (hang, fény, szövegkiírás).

Az érzékelőlap(ok) elhelyezése történhet matrac alá, illetve matrac fölé is, a Használati útmutatónak megfelelően alkalmazva (8.oldal).

Alapfunkció: ha a mozgás erőssége nem éri el a beállított küszöbértéket 12 másodpercig, akkor a készülék 3 rövid hangjelzéssel próbálja a babát erőteljesebb mozgásra készíteni. Ha ez nem sikerül,

csak akkor következnek a szülőnek szóló hangos jelzések. Az ilyen esetre felkészülve célszerű a gyermekorvosa tanácsát előzetesen kikérni.

A baba mozgásainak folyamatos figyelésével a MILIAN Lite légzésfigyelő még időben tud olyan jelzéseket adni a szülőnek, amelyek segítségével a nagyobb baj megelőzhető.

Rendeltetésszerű használat

- Nem használható és nem alkalmas semmilyen betegség diagnosztizálására, gyógyítására, megelőzésére!
- A készülék nem alkalmas bölcsőhalál (SIDS) megelőzésére, mert az egy váratlanul bekövetkező, előzmény nélküli esemény. Az időben történő észlelésnek és a szülő felkészültségének azonban óriási szerepe van az újraélesztés sikerében.
- Nem orvostechikai eszköz.
- Nem helyettesíti a szülői felügyeletet, felelősséget!
- Javasoljuk a babaelsősegély tanfolyam elvégzését!

Figyelmeztetések

Az érzékelőlapok vezetékeit rögzítse a kiságyhoz úgy, hogy azt a gyermek ne érje el, ne tudja behúzni magához. Ebben segíthet a mellékelt spirális vezetékrögzítő. Ha a készülék központi egységét a kiságyhoz rögzíti, akkor használja a készülékhez adott erős tépőzárat. A központi egységet úgy helyezze fel a kiságyra, hogy azt gyermeke semmilyen körülmények között ne érhesse el. Az így felhelyezett központi egységet célszerű ágyrácsvédővel is eltakarni a gyermek elől. A központi egységet tilos letakarni, lefedni! Ne engedje a gyermeket játszani a készülékkel! Ne engedje, hogy egy nagyobb testvér kezelje a készüléket! A készülék megfelelő működtetése a szülő feladata és felelőssége!

Korlátozások

Mivel a készülék nagyon érzékeny mozgásfigyelő, ezért a használata közben ezzel kapcsolatban be kell tartani néhány fontos szabályt:

- Csökkentse minimálisra a környezetből eredő rezgéseket, mozgásokat! Ilyen például a ventilátor, levegőt mozgó klímaberendezés, léghuzat, lépésből eredő padlómozgás, nagyobb gyerekek a kiságy környezetében játszása, stb.
- Amennyiben babaöbölben használják a készüléket, a babaöböl nem érintkezhet a felnőttek ággyával, mert a felnőttek mozgása átadódhat!
- A kiságy nem lehet elérhető távolságban másik gyerek kiságyától, vagy a felnőttek ággyától.
- A készülék érzékenysége úgy van beállítva, hogy csecsemő és kisgyermek mozgását figyelje, ezért a légzésfigyelőt 2 éves kor után, vagy 20 kg-nál nagyobb súlyú gyermeknél ne használja!
- A készülék bármilyen, kereskedelmi forgalomban kapható, kiságyba helyezhető matracal használható.

Üzembe helyezés

Olvassa el figyelmesen a készülékhez adott "Gyors üzembehelyezési útmutatót", és annak megfelelően járjon el!

Fontos, hogy a baba súlyának és a kiságy méreteinek megfelelően helyezze el az érzékelőlapokat. Ehhez segítséget nyújt a doboz hátoldalán levő fényképes elhelyezési segédlet, vagy a honlapunkon a "Dokumentumok" alatt található Telepítési útmutató (<https://milianbaby.hu/telepitesi-utmutato/>), illetve ez a Használati útmutató (8. oldal).

Általános szabály, hogy amíg nem mászkál el a gyermek álmában és a súlya meghaladja a 3,5 kg-ot, addig **egy** érzékelőlapot használjon a matrac alatt, a babával egy irányban elhelyezve. Ezzel az elhelyezéssel a baba teljes testhosszával az érzékelőlap felett lesz, így elkerülhető a melléfektetés. Ha majd elmászkál a baba a helyéről, akkor szükséges további érzékelőlap elhelyezése. Elmászkálás esetén a kiságyban keresztben célszerű elhelyezni az érzékelőlapokat, egymástól 5-15 cm távolságban.

Szintén fontos a téves riasztás elkerülése érdekében, hogy amíg a baba súlya **nem éri el a 3,5 kg-ot**, addig **egy** érzékelőlapot használjon, de ne a matrac alatt, hanem a matrac **felett** helyezze el azt. Ezzel a megoldással átmenetileg, amíg a baba súlya több nem lesz 3,5 kg-nál, kiiktatjuk a baba és az érzékelőlap közül a matracot a biztonságos érzékelés érdekében. A baba kényelme érdekében babapaplannal, vagy duplára hajtogatott puha pléddel takarja le az érzékelőlapot. Ha a baba súlya majd meghaladja a 3,5 kg-ot, akkor célszerű az érzékelőlapot a matrac alá helyezni.

Hasonlóan a matrac felett helyezze el az érzékelőlapokat, ha a babát **oldalt kell fektetni**, még akkor is, ha a súlya már több, mint 3,5 kg. Ez esetben ugyanis az alvás közben mozgást végző testrészek (has, mellkas) oldalirányban mozdulnak el, a gyerek ráadásul a karján fekszik, így sokkal kisebb mozgás adódik át a matrac és az érzékelőlap(ok) irányába.

Üzembe helyezés utáni próba

Baba nélkül kapcsolja be készüléket, majd figyelje a kijelzőt. Álljon kicsit távolabb, hogy mozgásával ne zavarja az érzékelést. Ilyenkor 0-1 érték kijelzése az elfogadható.

A nyugalmi helyzet elérése után (az először kijelzett, küszöbérték alatti szám) kb. 12 másodperc múlva sípol először egy rövidet a készülék, jelezve azt, hogy túl sokáig észlelt küszöbérték alatti mozgást. Ilyenkor, ha a gyerek mozgással reagál a hangra, akkor a készülék előlről kezdi a figyelési ciklust. Most a próbánál a gyerek helyett kicsit nyomja meg a matracot, hogy a figyelési ciklus újra elindul-e?

Három rövid hangjelzést ad a készülék akkor, ha nem kap mozgás visszajelzést, és csak azt követően indul be a riasztó jelzés, a nyugalmi állapot elérése után kb. 18-20 másodperccel. Ilyenkor a jelzést leállítani már csak a szülő tudja, egy rövid gombnyomással.

Ha sikeres volt a próba a baba nélkül, próbálja ki babával is. Ha ébren van a baba, akkor számkijelzés esetén 8-9 érték a megfelelő.

Amikor kiveszi a babát a kiságyból, az átmeneti nagy jelváltozás megszűnése után a készüléknek biztonsággal jeleznie kell a baba mozgásának megszűnését. Itt meg kell jegyezni, hogy vannak olyan matracok, amelyek a baba kivétele után, a súly megszűnése miatt sokáig, akár 10-20 másodpercig is utómozgást végeznek, amit a készülék mozgásnak érzékel. Szerencsére ez nem fordulhat elő valós helyzetben, amikor a baba a kiságyban van.

Abban az esetben, ha a baba nélküli tesztelés során azt tapasztalná, hogy nyugalmi helyzetben a készülék időnként, vagy folyamatosan magasabb értéket mutat, mint 0-1, az azt jelenti, hogy valamilyen külső eredetű mozgást érzékel. Ennek eredetét derítse ki, és a zavaró mozgást próbálja megszüntetni, vagy csökkenteni!

Előfordulhat azonban, hogy a külső zavaró mozgás nem szüntethető meg, például erős utcai forgalom esetén. Ez esetben a mozgásérzékelés küszöbértékét kell 2 egységgel magasabbra állítani, mint a tapasztalt zavarás értéke. Például ha a zavarás értéke 3, akkor az "L" küszöbértéket 5-re állítsa be. Ezt a készülék menüjében teheti meg.

L=3 küszöbérték megváltoztatása: Kapcsolja be a készüléket. Amikor üzemszerű állapotba kerül (5 másodperc), nyomja meg és tartsa nyomva a bekapcsoló gombot. Amikor megjelenik a kijelzőn "≡" jelzés, akkor engedje el a gombot, majd ismét nyomja meg és tartsa nyomva amíg "L" lesz (kb. 6 másodpercig).

A gomb rövid nyomkodásával léptetheti a küszöbérték számokat, hosszabb gombnyomással pedig kiválaszthatja azt. A készülék megjegyzi az új küszöbértéket, "P" kiírásával és rövid hangjelzéssel nyugtázza a művelet befejezését.

Ezzel kiküszöböljük a külső eredetű zavar befolyását, azonban így kevésbé lesz érzékeny a készülék a baba mozgására is. Ezért szükség lehet az érzékelőlap matrac feletti elhelyezésére egészen addig, amíg a baba súlya meg nem haladja a 4 kg-ot.

A gyárilag beállított "L" = 3 küszöbértéket általában nem kell megváltoztatni a használat időtartama alatt, csak abban az esetben, ha a külső zavaró mozgások más módon nem szűrhetők ki.

FONTOS! CSAK INDOKOLT ESETBEN VÁLTOZTASSA MEG A GYÁRILAG BEÁLLÍTOTT "L=3" KÜSZÖBÉRTÉKET!

A fenti tesztelést ismételje meg akkor is, ha áthelyezi a készüléket, vagy a kiságyat. Ettől függetlenül hetente egyszer szintén célszerű elvégezni a tesztelést.

M - (MEMORY REPLAY - Memória visszajátszása) - Visszanézhetők a legutóbbi 12 perc kijelzései:

Kapcsolja be a készüléket. Amikor üzemszerű állapotba kerül (5 másodperc), nyomja meg és tartsa nyomva a bekapcsoló gombot. Amikor megjelenik a kijelzőn "≡" jelzés, akkor engedje el a gombot, majd ismét nyomja meg és tartsa nyomva, amíg a kijelzőn megjelenik: "n" (kb. 10 másodperc). A nyomógomb elengedésével a készülék kiírja: Napló P12, majd automatikusan elkezd lejátszani a riasztás előtti 12 perc eseményeit.

A memóriában rögzített adatok visszanézésére akkor lehet szükség, ha például volt egy riasztás, de a baba jól van. Ez esetben nem egyértelmű, hogy valódi, vagy téves riasztás volt-e? Ennek eldöntéséhez nyújthat segítséget a riasztás előtti 12 perc adatainak visszanézése.

A visszajátszás 1 perces lépésekben történik, a 12. perctől visszafelé időben. Ezért az első kijelzés P12, majd elkezdődik a 12. percnél visszajátszása, az eredeti kijelzési ütem 3x felgyorsítva. Ha még új a készülék, és nincs 12 percnél adat a memóriában rögzítve, akkor a készülék beáll a ténylegesen rögzített adatok elejére, például P5 jelzéssel, ami 5 perc visszajátszást jelent.

Ha nem kívánja mind a 12 percet végignézni, akkor rövid gombnyomással a következő perc elejére léphet. A kijelzőn "L" jelenik meg egy pillanatra.

Ha meg akarja szakítani a lejátszást, akkor hosszan nyomja meg a gombot. "OFF" kiírása után a befejeződik a memória visszajátszása, a készülék leáll.

Elemfeszültség figyelés

A készülék megfelelő működéséhez elengedhetetlen, hogy az elemek megfelelő állapotban legyenek. Ezért különösen fontos, hogy az elemcsere időben megtörténjen akkor, amikor a készülék jelzi az elemek lemerülését.

Ugyanakkor elvárás, hogy a készülék ne bekapcsoláskor (amikor a baba éppen elaludt), vagy éjszaka működés közben jelezzen elemcsere miatt.


Az elemfigyelés úgy van beállítva, ha bekapcsoláskor a készülék megfelelőnek értékeli az elemek állapotát, akkor az elemek a következő 12 órában biztosítani tudják a légzésfigyelő működését.

A kikapcsolási folyamatban a készülék ismét ellenőrzi az elemek állapotát, és ha az közelít a nem megfelelő értékhez (<2,8V), akkor hanggal és "E" villogtatással jelzi. Ilyenkor elemet kell cserélni! Ha ez nem történik meg, akkor a jelzés megismétlődik a következő **bekapcsoláskor is**. Ha


időközben annyira lemerült volna az elem (<2,7V), ami már a biztonságos működést veszélyezteti, akkor nem lehet bekapcsolni a készüléket, feltétlenül elemcserére van szükség. **Ezzel az összetett elemfigyeléssel elkerülhető a baba nyugalmát megzavaró elemállapot jelzés**, mert először kikapcsoláskor van figyelmeztető hang, amikor a baba már feltehetően felébredt. Ha ezt követően megtörténik a szükséges elemcsere, ez esetben a következő bekapcsolás hangjelzés nélkül történik meg.

Érzékelőlapok elhelyezési módjai a kiságy felülnézeti rajzával


Amennyiben a baba súlya **nem éri el a 3500 grammot**, 1 érzékelőlapot kell a matracon elhelyezni hosszanti irányban. Az érzékelőlapot és a vezetékét egy lepedővel takarja le, majd a baba kényelme érdekében helyezzen a baba alá babapaplant. A baba az érzékelőlap felett legyen elhelyezve úgy, hogy a hasi, mellkasi része a lap közepe táján legyen:

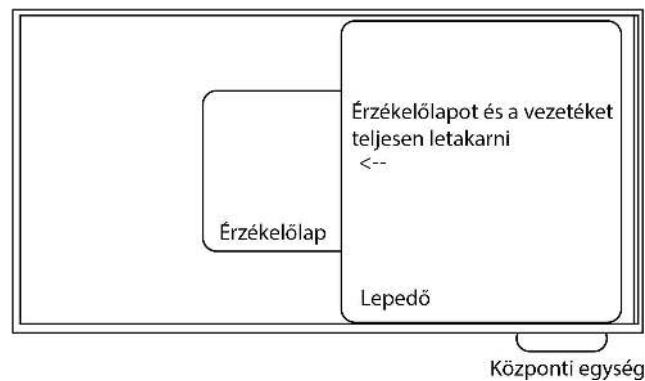


Hasonlóan a matrac felett helyezze el az érzékelőlapokat, ha a babát **oldalt kell fektetni**, még akkor is, ha a súlya már több, mint 3,5 kg. Miután a baba súlya **eléri és meghaladja a 3500 grammot**, 1 érzékelőlapot kell az ágyrács és a matrac közé helyezni, amíg a baba nem mászkál el a helyéről. A baba az érzékelőlap felett legyen elhelyezve úgy, hogy a hasi, mellkasi része a lap közepe táján legyen:

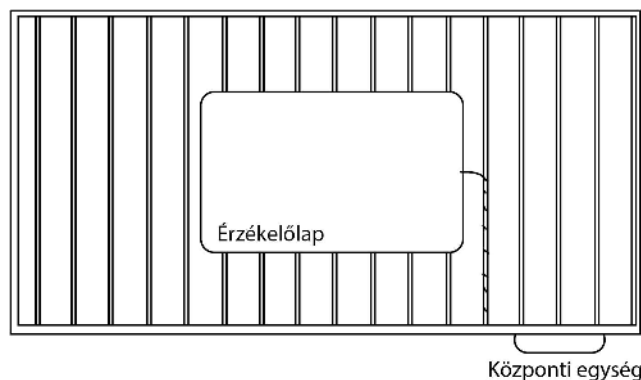

3500 gramm felett - amennyiben a baba **már elmászkál** a helyéről - az érzékelőlapokat az alábbi ábra szerint kell elhelyezni: **60X120** centiméteres kiságyhoz ideális elrendezés **2** érzékelőlappal:

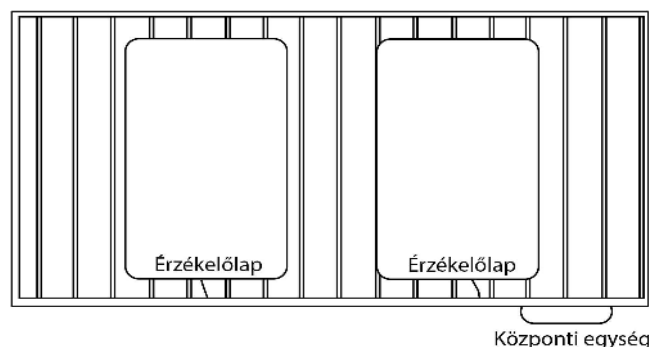

60X140 centiméteres kiságyhoz ideális elrendezés **3** érzékelőlappal, „Y” elosztóval.
Azt az érzékelőlapot helyezze középre, amelyik közvetlenül csatlakozik a központi egységhez.

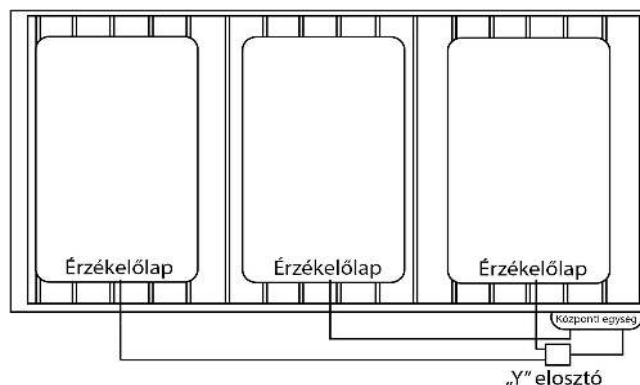


Tépőzár felhelyezése

A készülék csomagolása tartalmaz 2 db erős, öntapadó tépőzárát, melynek segítségével a készüléket rögzítheti a kiságyhoz. Az egyiket ragassza fel a kiságyra a kívánt helyre (a megfelelő tapadáshoz tiszta, zsírmentes felület szükséges). A tépőzár másik felét ragassza a készülék hátuljára az alábbi ábra szerint:



Vezetékrögzítő alkalmazása

A készülék csomagolása tartalmaz vezetékrögzítő spirál(oka)t, melyeket az alábbi ábra szerint kell felhelyezni a kiságy függőleges rácsára, odafogatva azzal a vezetékeket. Amennyiben szükséges, a vezetékeket is tekerje rá néhányszor az ágrácsra.

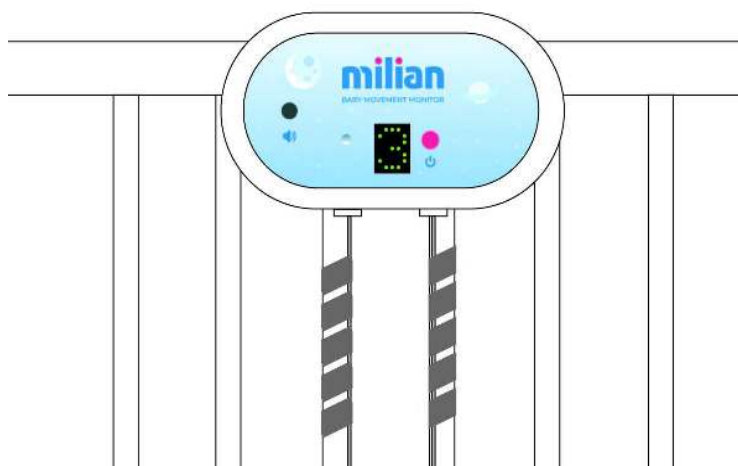

Műszaki adatok, tisztítás, karbantartás

A központi egység áramfelvétele kb. 1 mA,
Elemek várható élettartama kb. 1500 üzemóra, 1500 mAh kapacitású alkáli elemet feltételezve.
Kétfokozatú elemfeszültség kijelzés: előjelzés, biztonsági tiltás.
A kijelző típusa: 7 szegmenses, zöld.
A hangjelző típusa: piezoelektromos, 75-80 dB hangerejű.

Mivel a készülék elemfigyelése 2 db 1,5 V-os "AA" alkáli elemhez van beállítva, **ettől eltérő típusú elem, vagy tölthető elem nem használható** a különböző feszültség miatt.

A készülék elektromos zajkibocsátása (elektroszmog) gyakorlatilag nem mérhető.

Terhelhetőség: 20 kg, ha az érzékelőlapok a matrac alatt egyenletesen vannak elosztva. Matrac feletti érzékelőlap elhelyezésnél legfeljebb 10 kg a terhelhetőség, érzékelőlaponként.

A felhasznált műanyagok egészségügyben is használatosak (PVC, polikarbonát), oldószert nem bocsátanak ki, alkalmazásuk veszélytelen. Az érzékelőlapok csepegő víztől védettek. Nedves, szappanos törölkendővel tisztíthatók, egészségügyben használatos lemosó fertőtlenítő szerekkel fertőtleníthetők. A központi egység víztől nem védett, tisztítása nedves törölkendővel, az érzékelőlapokhoz használatos anyagokkal történhet. A központi egységet szennyeződés esetén, az érzékelőlapokat szennyeződés esetén, de legalább hetente ajánlott tisztítani. Tisztításon kívül a készülék egyéb karbantartást nem igényel.

Minden használat előtt javasolt a készülék, az érzékelőlapok és vezetékek állapotának vizuális ellenőrzése. Probléma, meghibásodás esetén lépjen kapcsolatba a készülék gyártójával, vagy forgalmazójával!

Útmutató az elemek behelyezéséhez a „Gyors üzembhelyezési útmutató”-ban található.

Információ az elemek biztonságos kezeléséhez

- Soha ne használjon újratölthető elemeket!
- Soha ne használjon szén-cink elemeket!
- Ne használjon együtt új és használt elemeket.
- Ne próbálja feltölteni a nem tölthető elemeket.
- Az elemeket a pólusokkal megfelelő irányba kell behelyezni.
- A lemerült elemeket vegye ki a készülékből, és kezelje megfelelően.
- Csak hasonló vagy ugyanolyan elemek használata ajánlott.
- Az elemek behelyezését vagy cseréjét csak felnőtt végezheti.
- Bizonyosodjon meg arról, hogy a használt elemek nem kerülhetnek gyerek kezébe, és helyezze az erre a célra kijelölt hulladékgyűjtőbe.
- Tartós használaton kívül helyezés esetén az elemeket vegye ki a készülékből!
- Amennyiben a készüléket már nem használja, a jogszabályoknak megfelelő hulladékgyűjtőbe helyezze.
- A készülék 10 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten használható, max. 90% páratartalom mellett.

Gyártói Megfeleléségi Nyilatkozat

Gyártó neve:
Empromilian Kft.
8000 Székesfehérvár Budai út 14.

A gyártó ezúton nyilatkozik, hogy a lent megnevezett készülékek CE nemzetközi jelzéssel vannak ellátva. A termékek megfelelnek a forgalmazásához szükséges nemzetközi és magyar szabványelőírásoknak és irányelveknek. Az adott termék pontos típusa és sorszáma a készülékhez mellékelt garanciajegyen található.

A termék megnevezése: Milian baby mozgásfigyelő készülékcsalád

Típusai:

- Milian Pro 1, 2, 3, 4
- Milian Lite 1, 2, 3
- Milian Pro Bluetooth

Az EU megfeleléségi nyilatkozatot kérje a gyártótól.
Nem orvostechnikai eszköz.



Varga Dávid
ügyvezető

Székesfehérvár, 2024.03.20.



Visszavásárlási lap

Tisztelt Vásárló!

Ez egy különleges **gyártói** visszavásárlási ajánlat a MILIAN Lite típusú légzésfigyelő készülékre:

A MILIAN Lite légzésfigyelő készüléket visszavásároljuk Öntől, ha már nincs rá szüksége. Mivel a baba egyéves koráig a hirtelen légzésleállítás reális veszély, ezért az **ajánlatunk csak a vásárlást követő 13-15. hónapban érvényes**. Megkímélt, nem rongálódott, működőképes készüléket a NETTÓ vételár 50 % -án megvesszük Öntől, ha a készülék nem régebbi 15 hónapnál, és felkínálja nekünk eladásra. Ez egy lehetőség, természetesen nem kötelező élni vele. Ha el akarja adni az egyéves készülékét, nem kell bajlódnia vele, mi azonnal kifizetjük a vásárláskori (új készülék) **nettó vételárának felét**, de legfeljebb a vásárláskor irányadó áraink nettó árának az 50 %-át: milianbaby.hu. Az új készülékének árát és vásárlás idejét számlával, blokkal, vagy annak másolatával kell igazolnia, ezért kérjük, hogy azt őrizze meg! A visszavásárlás lebonyolításához csupán ki kell töltenie az alábbi adásvételi megállapodást, és a készüléket a megállapodással el kell juttatnia vagy a székesfehérvári szervizünkbe (a szállítás költségét nem tudjuk vállalni):

MILIAN Baby légzésfigyelő szerviz:

8000 Székesfehérvár, Tarnócai u. 18/D

tel.: +36 30 7933747

Ha személyesen adja át a készüléket, akkor időpont egyeztetés szükséges!

Az így visszavásárolt készülékeket felújítjuk, és arra rászoruló intézményeknek adjuk, vagy csökkentett áron ismét megvásárolhatóvá tesszük.

Adásvételi megállapodás

Eladó eladja a tulajdonát képező MILIAN Lite típusú , gyári számú légzésfigyelő készülékét Vevőnek. A **jelenlegi** eladási ár Ft (az **eredeti NETTÓ** ár 50%-a), amit Eladó készpénzben, egy összegben átvett (bankszámlára utalás esetén ezt az utalás banki kivonata igazolja). Vevő és Eladó ezt követően semmilyen követelést nem támaszt egymással szemben.

Eladó (az Ön adatai):

Neve:

Címe:

Adószáma (ha van):

Bankszámla száma (csak akkor, ha erre a számlára kéri a kifizetést):

Telefonszám:

Vevő neve: Empromilian Kft.

Postai címe, ahova a készüléket küldje: 8000 Székesfehérvár, Tarnócai u. 18/D.

Székhely (**NEM** postai cím!): 8000 Székesfehérvár, Budai út 14.

Adószáma: 29318162-2-07

Eladó (Ön) aláírása:

Vevő (Empromilian Kft) aláírása:

Eladás dátuma: